

SIEMENS

機械器具（17） 血液検査用器具
ディスクリット方式臨床化学自動分析装置 JMDNコード：35743010
一般医療機器・特定保守管理医療機器（設置）

ディメンション ビスタ 500


【警告】

ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者において、実際の血糖値より高値を示すおそれがあるので、ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者における血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手すること。〔ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある。〕


【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

装置の外形と主な構成部品の名称は次の通りです。

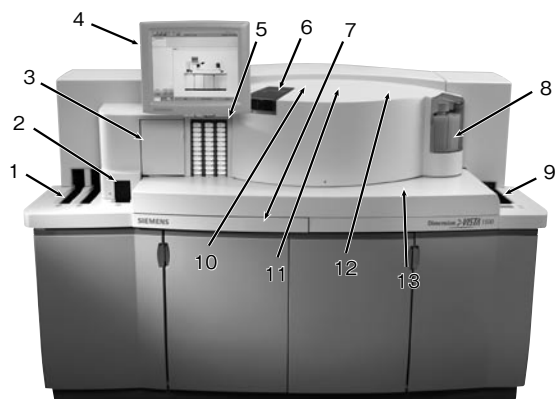

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 検体ラック投入レーン | 8 キュベット装填部 |
| 2 優先検体投入口 | 9 試薬装填部 |
| 3 V-LYTE | 10 フォトメーター |
| 4 モニター | 11 ネフェロメーター |
| 5 アリクオートプレート装填部 | 12 LOCI ディテクター |
| 6 LOCI 用ベッセル装填部 | 13 本体カバー |
| 7 キーボード・マウス | |

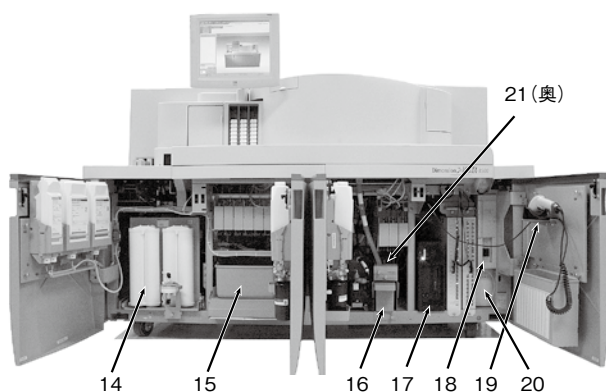

- | | |
|------------|---------------|
| 14 純水モジュール | 18 装置電源スイッチ |
| 15 廃棄容器 A | 19 バーコードスキャナー |
| 16 廃棄容器 B | 20 内蔵 UPS |
| 17 コンピューター | 21 廃液タンク |

- ・寸法：幅215cm×高141cm（除モニター）×奥行112cm
- ・重量：842kg（無停電電源装置を除く標準時）

2. 電気的定格

- ・定格電圧：AC200V
- ・周波数：50 / 60Hz
- ・定格消費電力：6500W
- ・電撃に対する保護の形式：クラス I 機器
- ・電撃に対する保護の程度：B 形機器

3. 光源

キセノンランプ、LED

4. 付属品

無停電電源装置

5. 原理

本装置は、比色法、比濁法、化学発光法、ネフェロメトリー法及び電極法によって血清、血漿、尿、髄液等の検体中の生化学、血漿蛋白、薬物、電解質等を定量的に測定するものです。本装置には冷蔵機能があり、試薬は2～8℃で保存されます。検体は検体ラックに入れ検体ラック投入レーンに、試薬、標準液及びコントロールは試薬装填レーンにセットします。反応容器（キュベット、ベッセル）は、予め装置にセットしておきます。検体、標準液及びコントロールは分注プローブによって反応容器に分注され、そこで試薬と共に一定時間反応します。反応生成物は各項目毎に決められている波長で測定され、標準液により作成された検量線から検体中の濃度又は活性値を求めます。電解質の場合は検体を希釈した後、電極センサーによってその濃度が求められます。

【使用目的、効能又は効果】

本装置は元来的方法を大きく変えずに、用手法による臨床化学分析法を着実に自動化した装置です。測定は、個別の試験チューブやキュベットで行われ、コンベアー又はターンテーブルで運ばれる途中に各ステーションで試料、希釈液及び試薬が調合されます。混合及び発色のための時間が考慮されており、その後に、内蔵されている分光光度計で反応混合物の吸光度を測定します。

※【品目仕様等】

- | | | |
|---------|-----------|--|
| 1. 測定波長 | ：比色法 | ：293 / 340 / 383 / 405 /
452 / 510 / 540 / 577 /
600 / 700nm |
| | LOCI法 | ：612 / 680nm |
| | ネフェロメトリー法 | ：840nm |

取扱説明書を必ずご参照ください。

- 2. 反応温度 : 37±0.5℃
- 3. 処理能力 : 最大500テスト／時間／ 1台
- 4. 検体搭載数 : 最大200検体／時間
- 5. 試薬搭載数 : 140カートリッジ以上／ 1台

【操作方法又は使用方法等】

1. 設置条件

開梱する前に、梱包の外観をチェックし破損がないことを確認してください。梱包に明瞭な損傷がありましたら、弊社までご連絡ください。本装置の設置は弊社担当者が行いますが、据え付け場所は次の事項に注意ください。

- (1)水のかからない場所に設置ください。
- (2)気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に設置ください。
- (3)傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等の安定状態に注意ください。
- (4)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないでください。
- (5)電源の周波数と電圧及び許容電流（又は消費電力）等にご注意ください。
- (6)アース用端子が付いているソケットのみを電源プラグに使用して、感電の危険を最小限にしてください。
- (7)本装置の上、背後、両側に適当な距離を確保できる水平な場所に据え付けてください。

2. 操作方法

操作をする場合は、操作手順、保守、調整方法について熟知している必要があります。安全性を確保するために、取扱説明書に記載されている全ての警告及び注意事項をよく読んでから操作ください。

- (1)電源コードをコンセントに接続し、メインスイッチをONにします。
- (2)検体測定に必要な情報をコンピュータに入力し、指定されたバーコードを検体に貼付します。
- (3)検体を検体ラック投入レーンに装填し、操作ボタンを押します。
- (4)測定は自動的に行われ、測定値がプリンター用紙に印字されます。
- (5)上記(2)～(3)を繰り返すことにより、常時新たな検体の測定を行うことができます。
- (6)測定終了後電源を切る必要はありません。

【使用上の注意】

1. 一般的注意事項

- (1)本装置の操作法やトラブルシューティング等のトレーニングを受けていない場合は、動作中の装置に触れることのないよう注意ください。
- (2)測定結果に基づく臨床判断は、臨床症状やその他の検査結果等と合わせて医師が総合的に判断ください。
- (3)本装置は精密な測定機器であり、機器の近傍で携帯電話等の使用等、電磁環境下での使用をしないでください。測定結果に影響を与える恐れがあります。
- (4)故障した際は、取扱説明書に明示された範囲で適切な措置を行い、修理担当者に連絡して修理ください。

2. その他の注意事項

- (1)コントロール等を用いて精度管理を実施ください。
- (2)精度管理は、少なくとも1日1回実施し、装置が正常に動作していることを確認ください。
- (3)使用期限切れの試薬は使用しないでください。

- (4)スイッチの接続状況、極性などの点検を行い、装置が正確に作動することを確認ください。
- (5)全てのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認ください。
- (6)コードやケーブルの接続が完了するまでは電源コードを差し込んだり、装置に電源を入れないでください。できる限り専用の電源ラインを使用ください。
- (7)操作中は装置全般に異常の無いことを絶えず監視ください。
- (8)操作中に異常が発見された場合には、安全な状態で装置の作動を止めるなど適切な措置を講じてください。
- (9)本装置を開けて部品の調整、メンテナンス、修理、部品交換などを行う際には、電源を切り、全ての電源コンセントから電源プラグを外してください。
- (10)使用後は定められた手順により電源を切ってください。
- (11)通電部品がむき出しになる危険があるので、保護ガード又は固定部品を外さないでください。本装置の電源を切った後も、特定の部品（コンデンサ等）には帯電によって電圧がかかっている場合がありますので、感電の危険がないように注意して取り扱ってください。
- (12)本装置を移動した場合は、適切な点検や動作確認を行ってから使用ください。
- (13)暫く使用しなかった装置を再使用するときには、使用前に装置が正常にかつ安全に作動することを必ず確認ください。
- (14)本装置は検査検体を処理するために設計されたシステムです。検体の中には感染の危険性があるものもあります。検体を装置にセットしたり、保守や修理を行う際には、感染を防ぐために決められた手順に従って操作ください。取扱説明書及び添付文書に記載されている全ての警告及び注意事項を遵守ください。
- (15)患者検体に接触する全ての物（人体組織を含む検体や試薬、又は人体組織と接触した装置の部位等）に感染の危険性があると考え、各施設の感染性医療廃棄物取扱い規定に従って取り扱ってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

本装置は次の使用環境条件の室内に据え付けてください。

- (1)相対湿度：20～80%
- (2)温度：18～25℃（温度変動：2.8℃／時以内）

2. 耐用期間

装置据付後、約7年間 [自己認証（当社データによる）]

上記耐用年数は、継続使用中であって取扱説明書及び添付文書にて当社が定める使用環境下で通常の使用をしていて、推奨する定期的な保守点検を実施し、故障時には当社の認定する修理サービスを受けていることが条件となります。なお、耐用期間内においても次の部品は交換が必要です。

- (1)消耗部品
- (2)故障部品：突発的な部品故障、著しい磨耗、劣化、破損などが生じた部品など。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項：詳細については取扱説明書の「メンテナンス」の項を参照ください。

- (1)毎日の保守点検
 - ・自動システムチェックによるプローブテスト
 - ・温度・湿度確認
 - ・検体ラック投入レーンの清掃

- ・廃棄容器内の廃棄物処理
 - ・試薬・消耗品の補充
- (2)毎月の保守点検
- ・エアフィルターの清掃・交換

2. 業者による保守点検事項

2回／年の保守点検

- ・バイオ廃液ポンプの交換をします。
- ・バイオ廃液Duck Billバルブの交換をします。
- ・エアーレギュレーターパネルの交換をします。
- ・トランスファーアームベアリングの洗浄及び注油をします。
- ・バキュームトラップフィルターの交換をします。
- ・UVランプの交換をします。
- ・給水フィルターの交換をします。
- ・フレックス廃棄シャトルの清掃をします。
- ・サーバー 1セパレーターの点検をし、必要に応じ交換します。
- ・サーバー 1廃棄ドアの動きを点検します。
- ・ドレインチューブを点検し、必要に応じ交換します。
- ・サンプルラックの清掃をします。
- ・センサー類の点検及び清掃をします。
- ・Visionシステムカメラの清掃をします。
- ・B、C、D、F及びGマニフォールドのフィルターを交換します。
- ・A、AA、E及びEEプローブマニフォールドのフィルターを交換します。
- ・ドライヤーブーツを交換します。
- ・プローブ本体及びブッシュを清掃します。
- ・全てのエアーフィルターを交換します。
- ・全てのドアヒンジを点検します。
- ・全ての廃液、給水、エアーラインの接続を点検します。
- ・IMTベリスタポンプチューブを交換します。
- ・IMTシステム清掃と点検を行います。
- ・POGOピンを点検し、必要に応じ交換します。
- ・バーコードリーダーレンズを清掃します。
- ・LOCIバキュームカップ及びバキュームポンプフィルターを交換します。
- ・ベッセルローダーシャトル及びチューブを清掃します。
- ・ベルト類のテンションを点検します。
- ・アリコット廃棄シュートを清掃します。
- ・各種シャフトの清掃及び注油をします。
- ・キューベット廃棄部及びチューブの清掃をします。
- ・ミリバック/バイオバックを交換します。
- ・全てのポンプの漏れを点検します。
- ・キューベッティングクリップを点検し、必要に応じ交換します。
- ・Pressure integrity キューベットを交換します。
- ・温度点検を行います。
- ・フォトメータフラッシュランプの交換及び調整をします。
- ・フォトメーターファンフィルターを交換します。
- ・デコンタミを行います。

【包装】

1台単位で梱包します。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

※問い合わせ先：

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
カスタマーケアセンター
TEL：03-3493-8400

※製造販売元：

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
東京都品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー

製造元：

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
シーメンス ヘルスケア ダイアグノスティクス インク
アメリカ合衆国

